

# Anpassa HandiKalender

---

En guide till de viktigaste anpassningarna och inställningarna i HandiKalender för Android.



HandiKalender




# Inställning notiser


Hur ska larmnotiser från HandiKalender visas?

Fullskärm  
Notis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

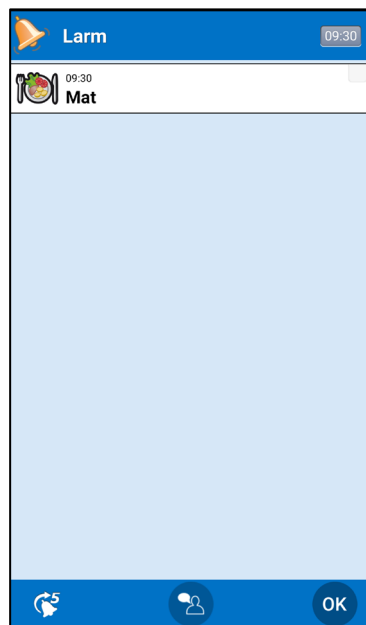

*"Fullskärm"  
(Förinställt)*

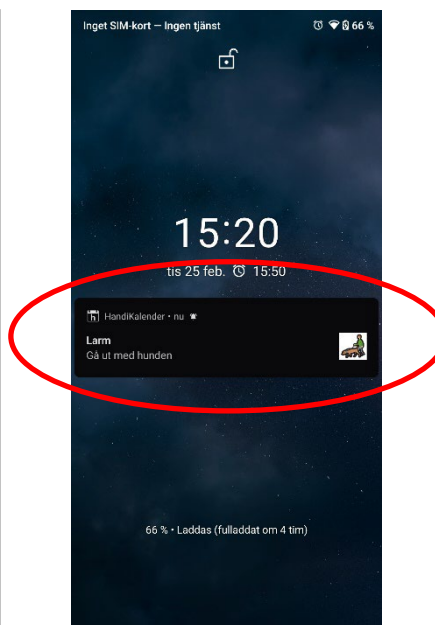

*"Notis"  
Notiser kan även  
visas på en  
smartwatch.*

*(Om skärmen är  
tänd och  
HandiKalender är  
igång visas  
HandiKalenders  
larmvy direkt)*

# Talstöd

Ska talstöd (talsyntes) användas?

Ja ☐  
Nej ☐

1. Tryck på *Talstöd*-knappen så att den blir markerad.
2. Tryck på det som ska läsas upp.



# Kalendervyn – bläddra

Ska man kunna bläddra bakåt till aktiviteter som har varit samma dag?


Ja ☐  
Nej ☐

Ska man kunna bläddra i dagar framåt?

Nej ☐  
Ja, max 6 dagar ☐  
Ja, obegränsat ☐

Ska man kunna bläddra i dagar bakåt?

Ja ☐  
Nej ☐

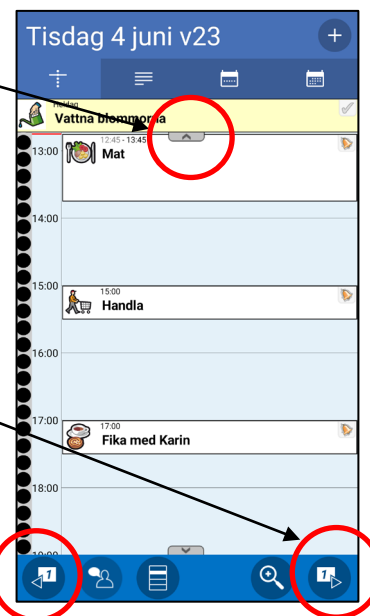

# Kalendervyn – aktiviteter


Ska den digitala tiden för aktiviteten visas?

Ja ☐  
Nej ☐



Ska texten för aktiviteten visas?

Ja ☐  
Nej ☐

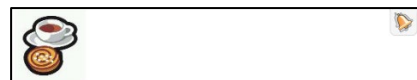


# Aktivitetsvyn

Ska användaren kunna ta bort en aktivitet?

Ja ☐  
Nej ☐

Ska användaren kunna ändra en aktivitet?

Ja ☐  
Nej ☐

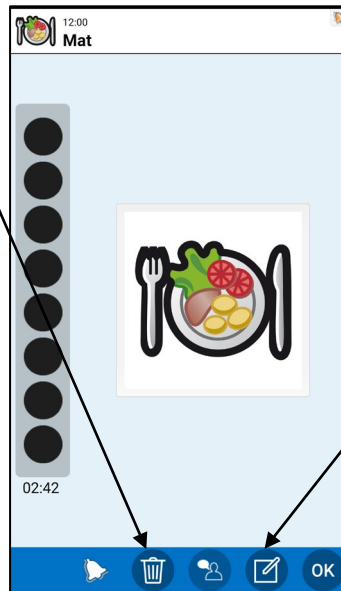

Visa sista kvarten som 5 punkter

Visa digital nedräkning nedanför kvarturet



☐  
☐

# Lägga in aktivitet – förvalt larm

Vilken typ av larm ska vara förinställt?

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Larm + vibration              | <input type="checkbox"/> |
| Larm (ljudsignal)             | <input type="checkbox"/> |
| Vibration                     | <input type="checkbox"/> |
| Tyst larm (ljudlöst)          | <input type="checkbox"/> |
| Inget larm (ingen notis alls) | <input type="checkbox"/> |

Larmtypen kan sedan ställas in per aktivitet.

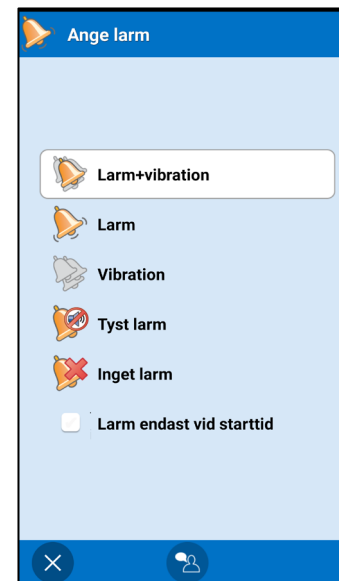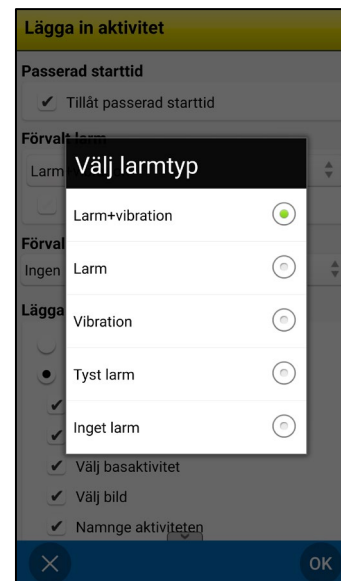

# Lägga in aktivitet

Ska man kunna lägga in aktiviteter på starttid som passerat?

Ja ☐  
Nej ☐

Ska man lägga in aktiviteter via Ändravyn eller i sekvens?

Ändravyn ☐  
Sekvens ☐

Ändravyn

The screenshot shows a form titled 'Fredag 9 september v36'. It includes fields for 'Namn:' (Name), 'Starttid:' (Start time), 'Sluttid:' (End time), 'Tidslängd:' (Duration), 'Heldag:' (Full day), 'Ta bort efteråt:' (Remove afterwards), and 'Kategori:' (Category). There are also buttons for 'Bild' (Image), 'i' (Info), and 'OK'. At the bottom, there is a section for 'Tillgänglig för:' (Available for) with a button for 'Alla mina stödpersoner' (All my support persons).

The screenshot shows a sequence of screens for adding an activity. The first screen is 'Välj bild' (Select image). The second screen is 'Namnge aktiviteten' (Name the activity). The third screen is 'Info-meny' (Info menu) with options like 'Ingen info', 'Timer', 'Bild', 'Röstanteckning', 'Anteckning', 'Checklista', 'Kontakt', 'Telefon', and 'SMS'. The fourth screen is 'Ange starttid' (Specify start time) with a digital clock display and a numeric keypad. The fifth screen is a numeric keypad for entering the start time.

Sekvens



# Lägga in aktivitet via Ändravyn

Om Ändravyn är valt, vilka vyer ska visas?

Ska man kunna välja basaktivitet?

Ja ☐  
Nej ☐

Ska man kunna välja typ av aktivitet?








Ja ☐  
Nej ☐

The image shows two mobile app screens side-by-side. The left screen is titled "Välj typ av aktivitet" (Select type of activity) and has a light blue background. It lists three options: "Enstaka" (Single), "Heldag" (Full day), and "Återkommande" (Recurring). The right screen shows a form for adding an activity. At the top, it says "Fredag 9 september v36". Below that is a "Namn:" field with the placeholder "Namnge aktiviteten". There are fields for "Starttid:" (Start time), "Sluttid:" (End time), and "Tidslängd:" (Duration), each with a time picker. There is a "Bild" (Image) button. There are "Heldag:" (Full day) and "Ta bort efteråt:" (Remove afterwards) sections, each with a "Nej" (No) button. There is a "Kategori:" (Category) field with "Ingen" (None) selected. There is a "Tillgänglig för:" (Available for) field with "Alla mina stödpersoner" (All my support persons) selected. Both screens have a bottom navigation bar with icons for back, home, add, settings, and OK.

# Lägga in aktivitet via sekvens

Om sekvens är valt, vilka vyer ska visas?

Välj datum  
Välj typ av aktivitet  
Välj basaktivitet  
Välj bild  
Namnge aktiviteten  
Info-meny  
Ta bort efteråt  
Kvittera och larm  
Välj kategori  
Tillgänglig för  
Ange påminnelse  
Ange tidslängd  
Ange sluttid

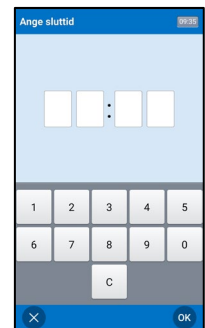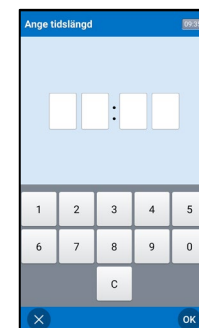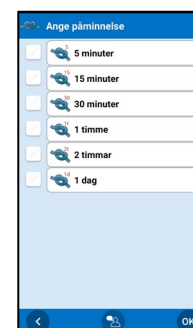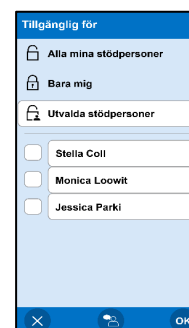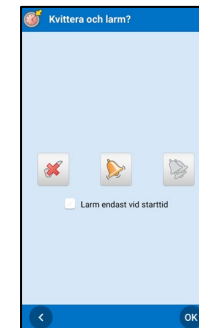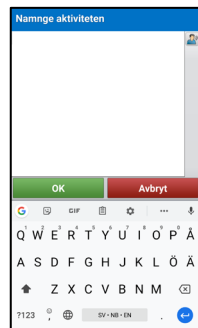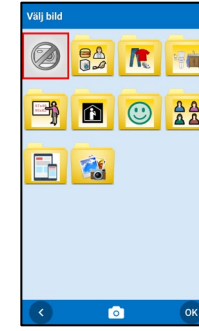Välj i Inställningar|Lägga in aktivitet.

# Ändravyn

Vilka funktioner ska visas i Ändravyn?

Datum	
Sluttid	
Heldag	
Kvittering	
Ta bort efteråt	
Kategori	

Namn: Namnge aktiviteten

Starttid: ---:--

Sluttid: ---:--

Tidslängd: ---:--

Heldag: Nej

Ta bort efteråt: Nej

Kategori: Ingen

Tillgänglig för: Alla mina stödpersoner

Bild

Info

< [Lock] [Checkmark] [Warning] OK


Info-menyn
Larmtyp
Påminnelse

# Koppla funktion till aktiviteten

- Få information när man behöver den
- Man behöver inte leta

Vilka funktioner ska visas i Info-menyn och därmed kunna kopplas till en aktivitet?

Timer	<input type="checkbox"/>
Bild	<input type="checkbox"/>
Röstanteckningar	<input type="checkbox"/>
Anteckningar	<input type="checkbox"/>
Checklista	<input type="checkbox"/>
Kontakt*	<input type="checkbox"/>
Telefon*	<input type="checkbox"/>
SMS*	<input type="checkbox"/>
Adress	<input type="checkbox"/>
Tredjepartsapp	<input type="checkbox"/>

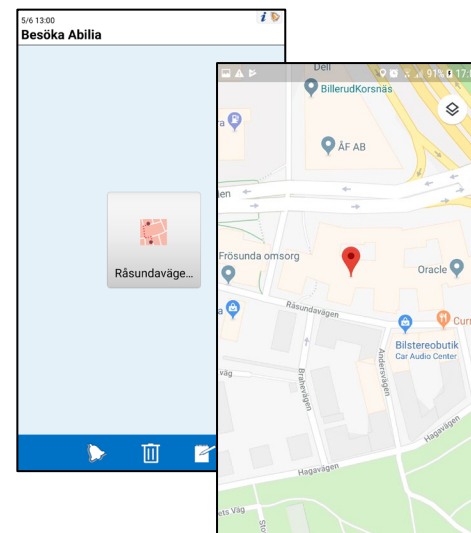

*Exempel på kopplad adress*

\*Kopplar till enhetens inbyggda app

Välj i **Inställningar**|**Info-menyn**.

# Funktioner i Kalendermenyn

Ska användaren lägga in nya aktiviteter själv?

Ja ☐  
Nej ☐

Ska användaren kunna använda timer?


Ja ☐  
Nej ☐

Ska användaren kunna söka aktiviteter?

Ja ☐  
Nej ☐

Ska användaren kunna hantera basaktiviteter och bastimers?

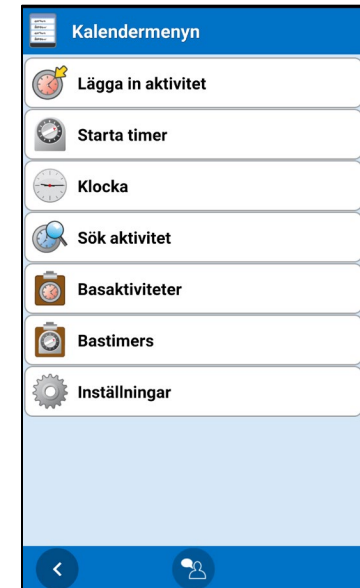


Ja ☐  
Nej ☐



# Kalendervyn - tid







Ska det vara analog klocka eller lägga-till-aktivitet-knapp i datumfältet?

Lägg till aktivitet ☐  
Analog klocka ☐

 Onsdag 15 maj	
Onsdag 15 maj	

Ska månad markeras med symbol eller med veckonummer?

Handi-symbol ☐  
Pictogram ☐  
Veckonummer ☐  
Inget ☐

 Onsdag 15 maj	
 Onsdag 15 maj	
Onsdag 15 maj v20	
Onsdag 15 maj	

Ska dagarna ha veckodagsfärger eller inte?

Veckodagsfärger ☐  
Inte veckodagsfärger ☐


 Onsdag 12 juni	
 Onsdag 12 juni	

Grön måndag  
Blå tisdag  
Vit onsdag  
Brun torsdag  
Gul fredag  
Rosa lördag  
Röd söndag


# Tidinmatning

Ska man välja start- och sluttid genom att skriva in tiden med siffror, eller genom att flytta visarna på en urtavla?


- Digital (med siffror) ☐
  - Analog (med urtavla) ☐
  - Digital med Analog-knapp ☐
  - Analog med Digital-knapp ☐
- (Då kan man byta mellan de två metoderna)*

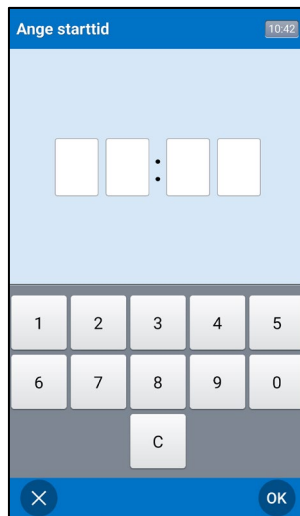


Digital

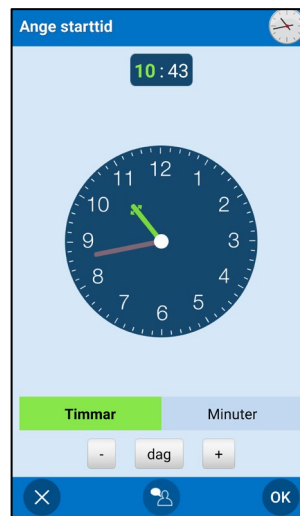

Analog

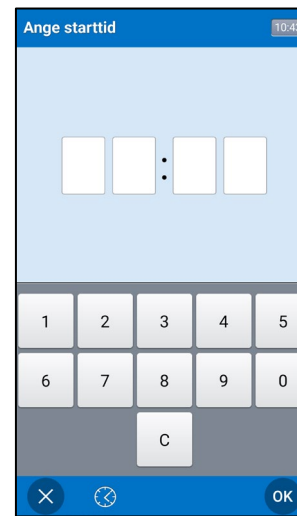

Digital med knapp



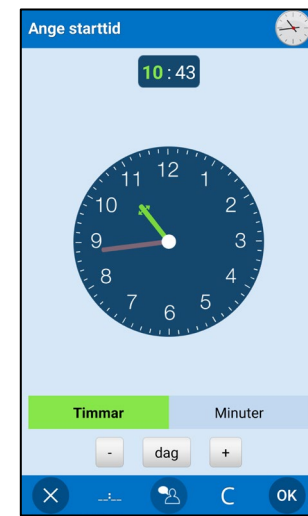


Analog med knapp

# Klockvyn

Ska det vara analog eller digital klocka i visningen?

Analog	<input type="checkbox"/>
Digital	<input type="checkbox"/>
Analog och digital	<input type="checkbox"/>

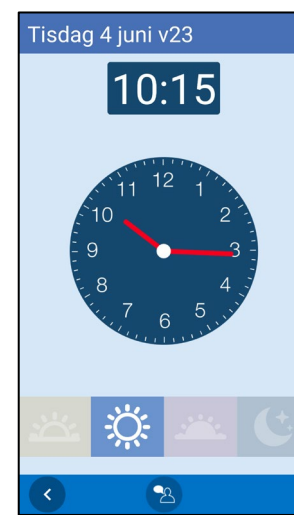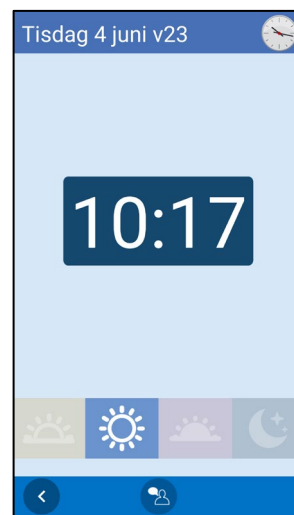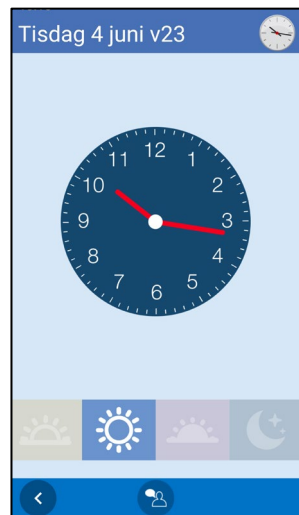



# Veckovyn

Ska återkommande aktiviteter visas?


Ja ☐  
Nej ☐

Hur många dagar ska visas i veckovyn?

5 ☐  
7 ☐

Hur ska aktiviteter visas?

Med tid ☐  
Med bild ☐

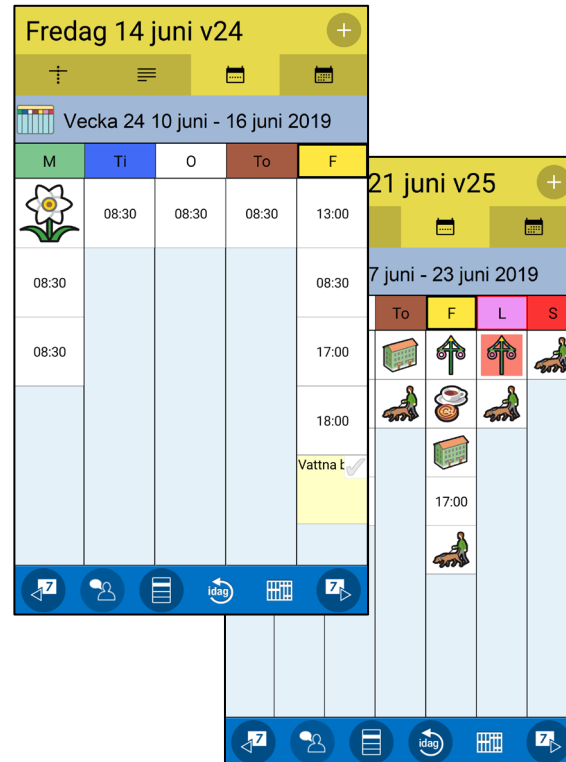

# Starta timer

Ska användaren kunna  
välja Bastimers?


Ja ☐  
Nej ☐

Ska man kunna lägga  
in text till en ny timer?

Ja ☐  
Nej ☐

Ska man kunna välja  
en bild till en ny timer?

Ja ☐  
Nej ☐

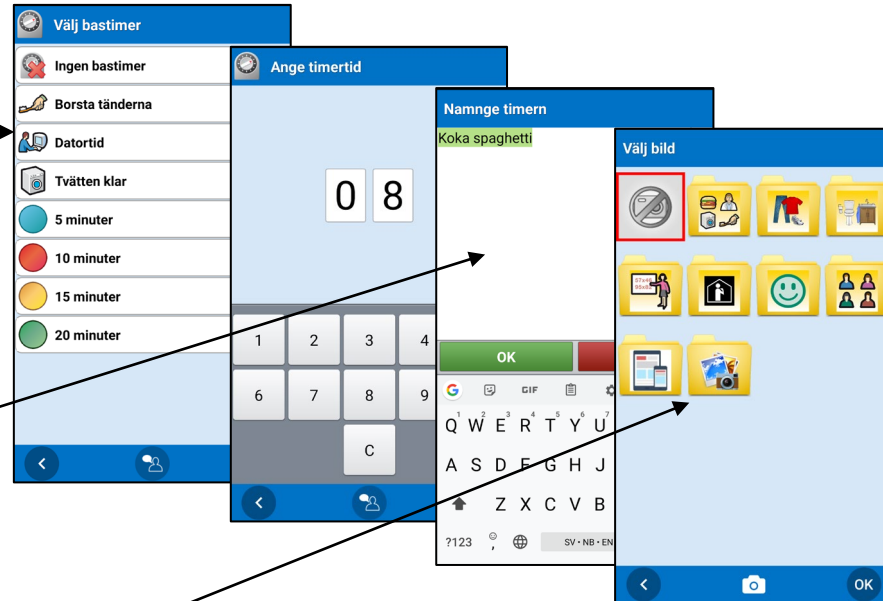

# Kvittering av aktiviteter

För att bekräfta för sig själv eller andra (via myAbilia) att aktiviteten är utförd



Utförd

Behöver användaren kvittering  
på aktiviteterna?

Ja ☐  
Nej ☐


*Lägg in direkt i  
basaktiviteten!*

*Kom ihåg att välja  
vid inläggning*

# Använda basaktiviteter

- Förprogrammerade aktiviteter som gör inläggningen enklare
- Ger förslag på aktiviteter och kan därför vara aktiverande och motiverande

Vilka **basaktiviteter** behöver användaren?

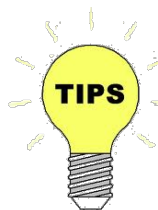


Det går att koppla funktioner även till basaktiviteterna, se [Koppla funktion till aktiviteten](#).



# Använd bastimers

- Förprogrammerade timers som gör inläggningen enklare
- Möjligt att ha flera timers igång samtidigt och skilja dem åt med namn och bild

Vilka **bastimers** behöver användaren?

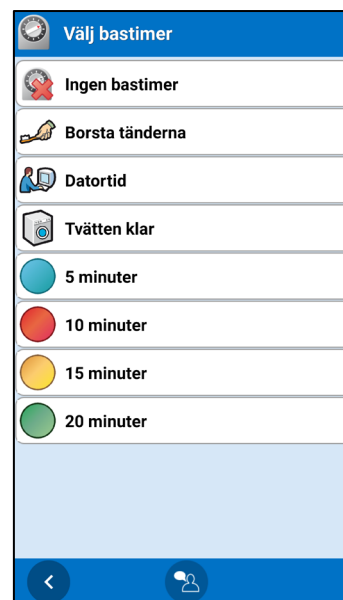

# Larm – Ljudsignal

- Välj olika larmljud för olika aktiviteter.
- Välj, under ”Larmtid”, hur länge larmen ska ljuda (som längst)?
- Välj mellan:

Signal	
15 sekunder	
30 sekunder	
1 minut	
2 minuter	
5 minuter	

**Larmljud**

**Ej kvitterbara aktiviteter**

Morgonljus

**Kvitterbara aktiviteter**

Morgonljus

**Timers**

Morgonljus

**Påminnelser**

- Inget ljud -

☒ Vibration vid påminnelse

**Larmtid**

30 sekunder

OK

# Kodskyddad inställningsmeny

- Förhindrar oavsiktlig ändring av inställningar, basaktiviteter och bastimers

Behöver inställningsmenyn i  
HandiKalender kodskyddas?

Ja ☐  
Nej ☐

The screenshot shows a mobile application interface for 'Kodskydd' (Code Protection). At the top is a yellow header with the title 'Kodskydd'. Below the header, the word 'Kod' is displayed. To its right is a text input field containing the number '0353'. Below this, there is a checkbox labeled 'Kodskydda inställningar'. At the bottom of the screen is a blue navigation bar with a white 'X' icon on the left and the text 'OK' on the right.

# handi

Ett hjälpmedel för  
trygghet och självständighet

Läs mer på [www.abilia.se](http://www.abilia.se)