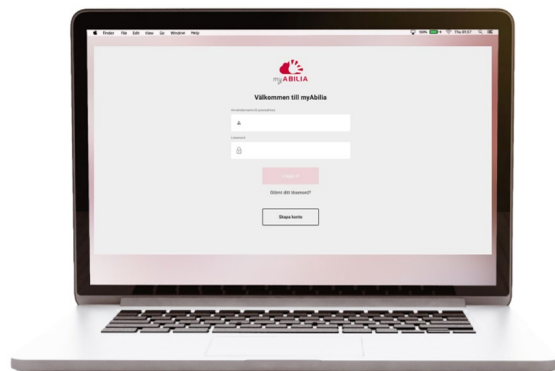


# Kom igång med myAbilia och CARY Base



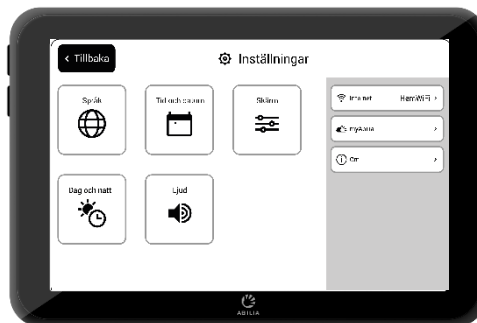
# Kom igång med myAbilia – steg för steg

## 1. Skapa myAbilia-konto




- Gå till [www.myabilia.com](http://www.myabilia.com) på dator, mobiltelefon eller surfplatta.
- Skapa ett användarkonto på myAbilia.
- Logga in på myAbilia.
- Välj kalendermodulen CARY.**
- Importera bildbasen CARY.**

## 2. Anslut CARY Base till myAbilia



*Se till att enheten är ansluten till Wi-Fi och logga in med användarkontot.*

## 3. Lägg in aktiviteter

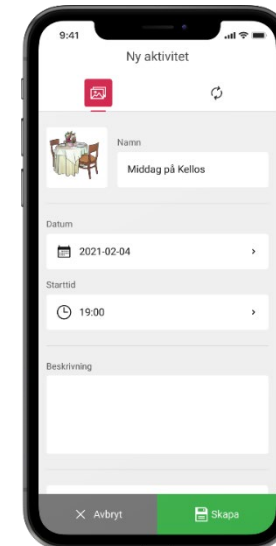

*Logga in med användarkontot på [www.myabilia.com](http://www.myabilia.com) på dator, mobiltelefon eller surfplatta.*

*Använd sedan myAbilia för att hantera kalendern i CARY Base.*


Om du behöver mer hjälp, följ instruktionerna i denna lathund!

# Skapa användarkonto på myAbilia



1. Öppna en webbläsare och gå till [www.myabilia.com](http://www.myabilia.com).
2. Välj **Skapa konto**.
3. Välj kontotyp **Användare** och följ instruktionerna.

**www.myabilia.com**



**Välkommen till myAbilia**

Användarnamn/E-postadress

Lösenord

Logga in

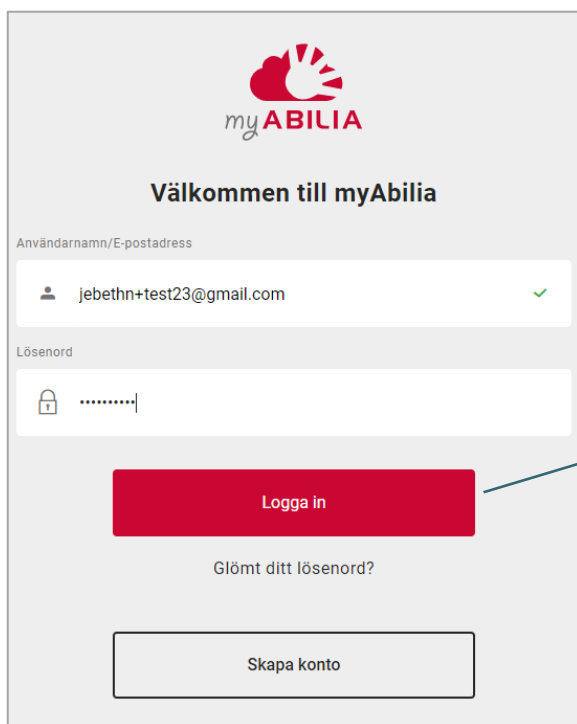
Glömt ditt lösenord?

**Skapa konto**

# Logga in på myAbilia



1. Öppna en webbläsare och gå till [www.myabilia.com](http://www.myabilia.com).
2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord och välj **Logga in**.



myABILIA

Välkommen till myAbilia

Användarnamn/E-postadress

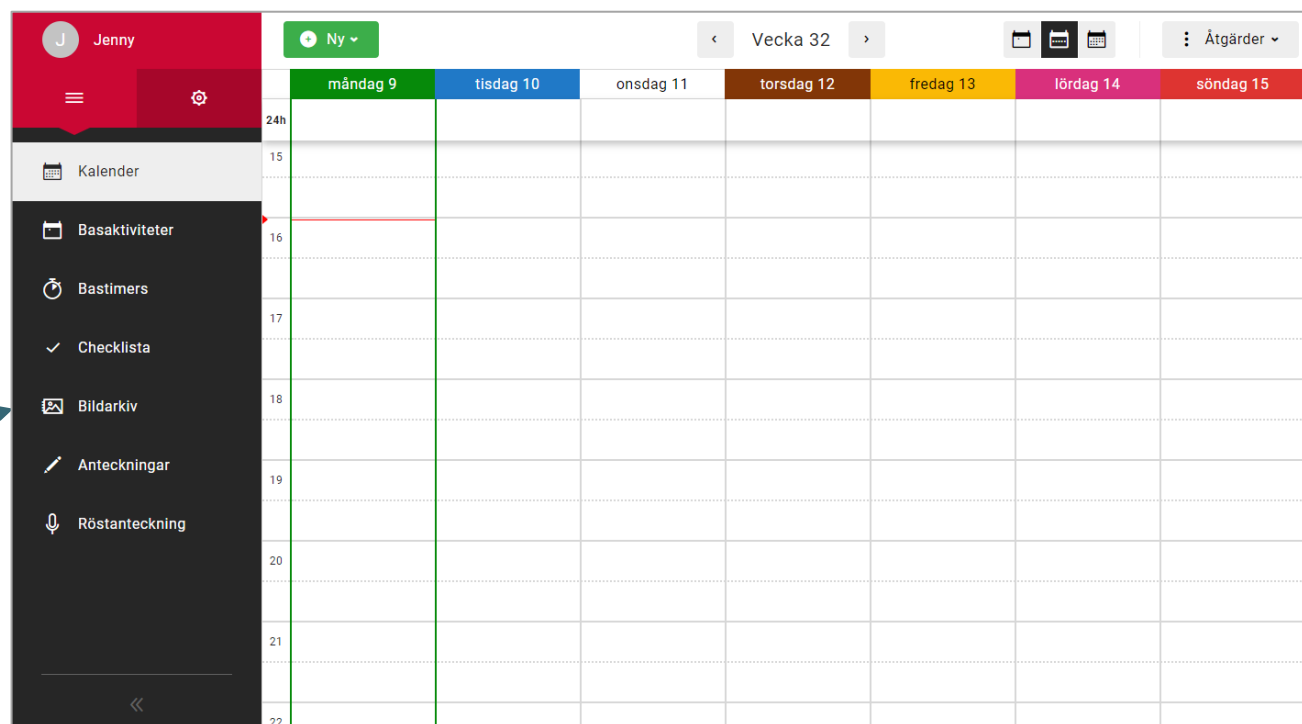
jebethn+test23@gmail.com ✓

Lösenord

Logga in

Glömt ditt lösenord?


Skapa konto



# Välj kalendermodulen CARY



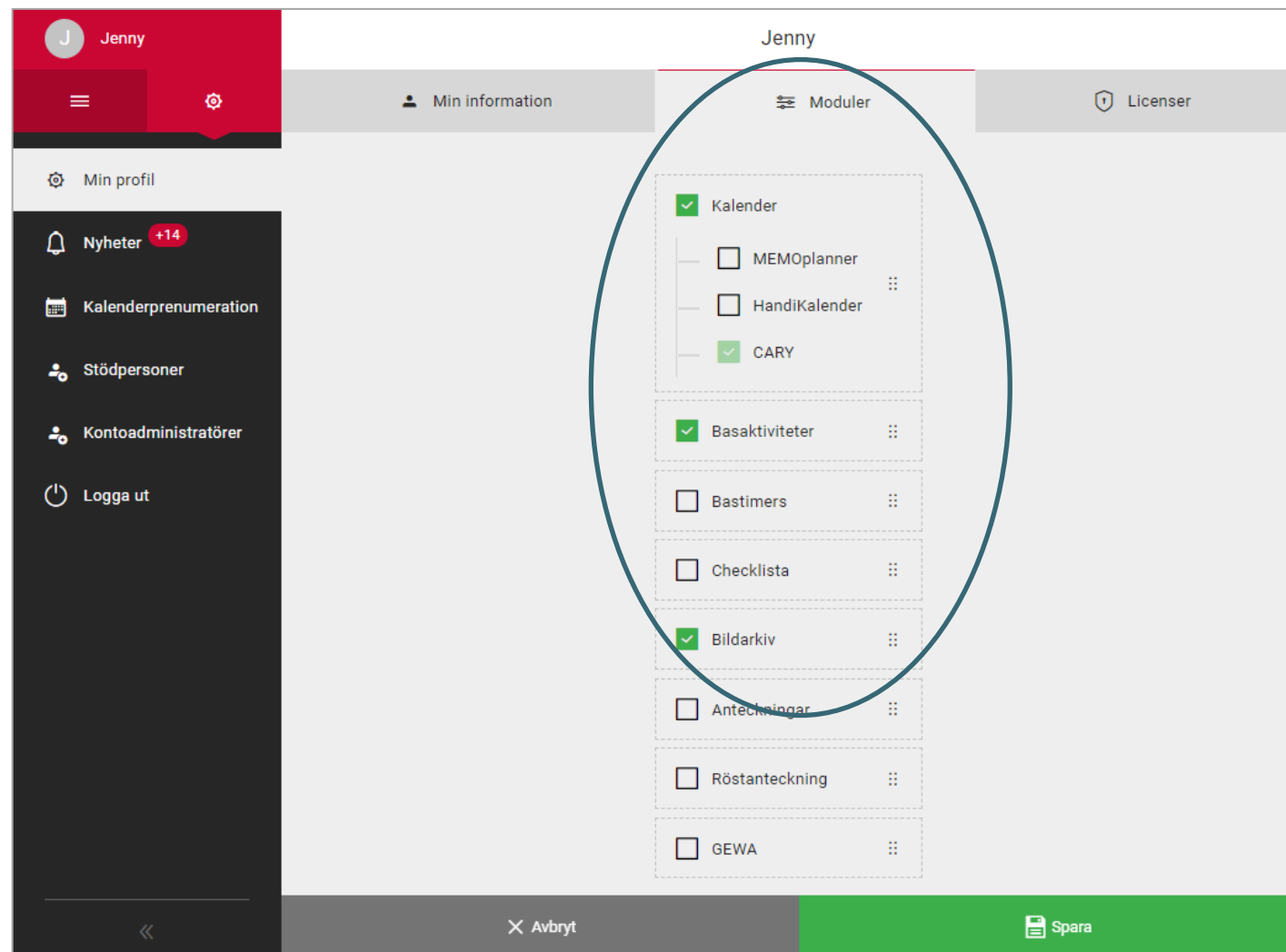
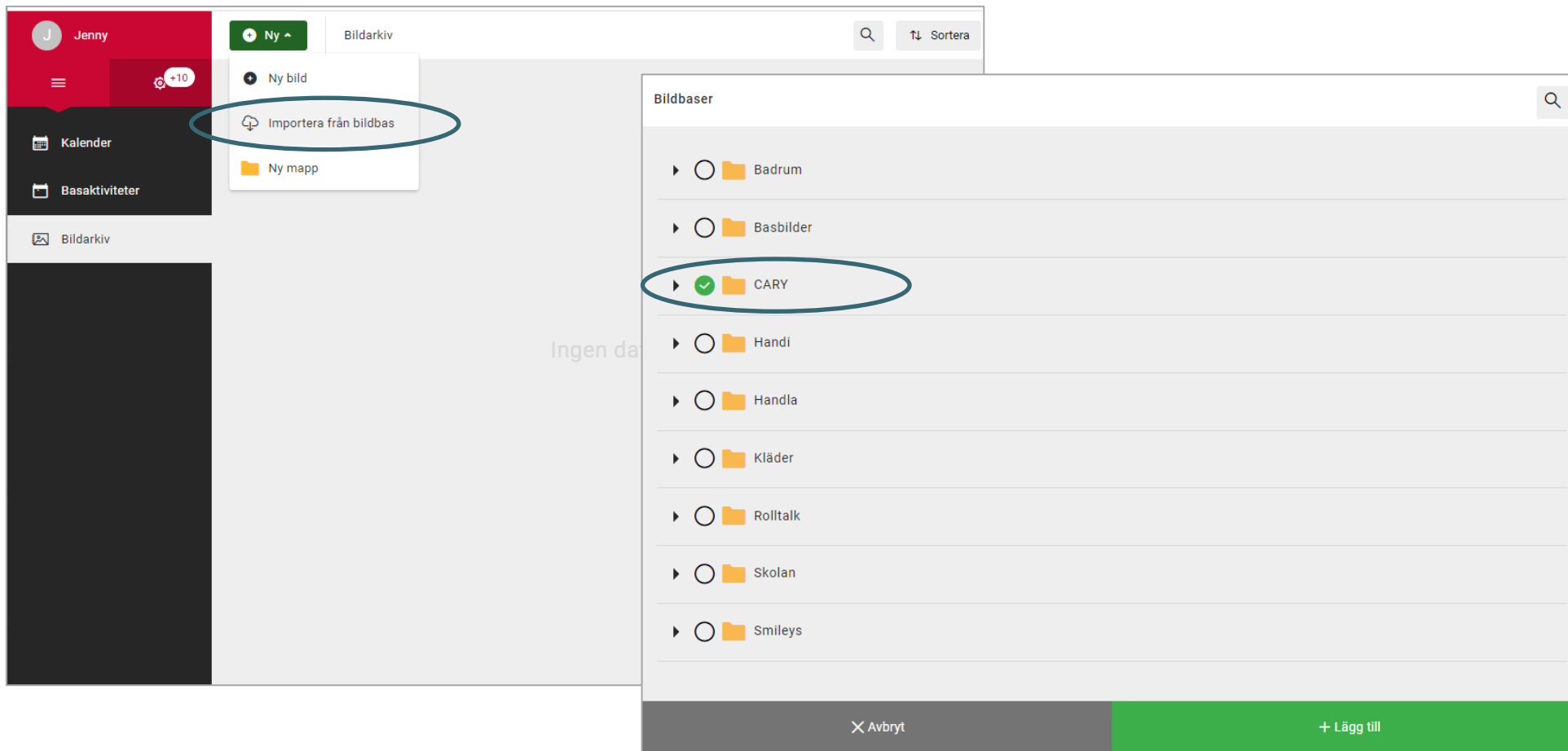
1. Välj  och **Min profil** i menyn.
2. Välj fliken **Moduler** och välj de moduler som är avsedda för CARY:
  - Kalender – CARY
  - Basaktiviteter
  - Bildarkiv
3. Välj **spara**.



# Importera bildbasen CARY



1. Välj  och **Bildarkiv** i menyn.
2. Välj **Ny** och **Importera från bildbas**.
3. Välj bildbasen **CARY** och **Lägg till**.



The screenshot displays the ABILIA web application interface. On the left, a sidebar menu shows the user 'Jenny' and navigation options: 'Kalender', 'Basaktiviteter', and 'Bildarkiv'. The 'Bildarkiv' option is selected. A dropdown menu is open under 'Bildarkiv', showing options: 'Ny bild', 'Importera från bildbas' (circled in blue), and 'Ny mapp'. The main area shows a list of image bases ('Bildbaser') with the following items: 'Badrum', 'Basbilder', 'CARY' (circled in blue and marked with a green checkmark), 'Handi', 'Handla', 'Kläder', 'Rolltalk', 'Skolan', and 'Smileys'. At the bottom, there are two buttons: 'Avbryt' (Cancel) and '+ Lägg till' (Add).

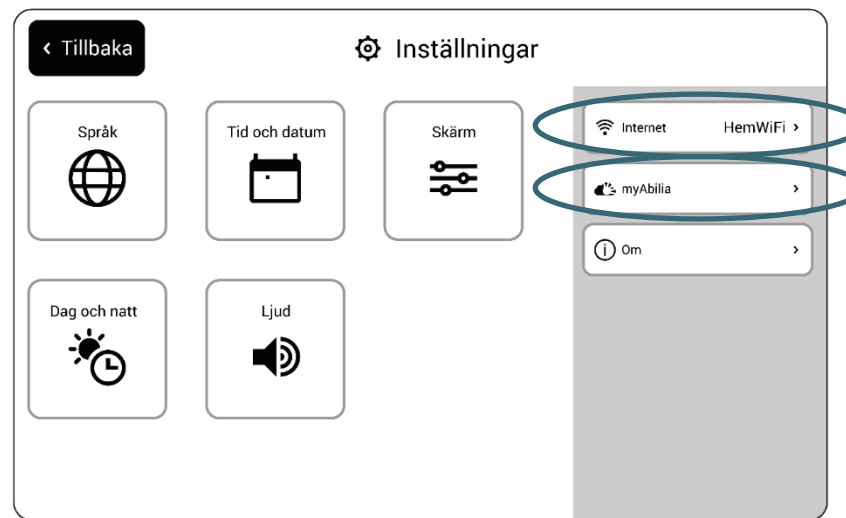
# Anslut CARY Base till myAbilia



1. Gå till På/Av-menyn och välj **Inställningar**.




2. Om enheten inte redan är ansluten till Internet, välj **Internet** och välj ett tillgängligt trådlöst nätverk (Wi-Fi).
3. Välj **myAbilia**.
4. Skriv in ditt användarnamn och lösenord och välj **Logga in**.
5. Välj **Tillbaka** och sedan **Stäng** för att komma tillbaka till huvudvyn.



# Lägg in aktiviteter

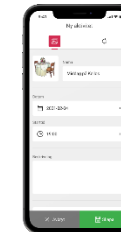1. Logga in på [www.myabilia.com](http://www.myabilia.com) med ditt användarkonto.
2. Klicka direkt i kalendern för att välja **Datum** och **Tid** för aktiviteten.
3. Skriv in aktivitetens namn i fältet **Namn**.
4. Lägg till en **Bild** och **Beskrivning** till aktiviteten (valfritt).
5. Välj att spela upp ett **meddelande** eller **text** när påminnelsen kommer (valfritt).
6. Välj **Skapa** för att spara aktiviteten.




**Ny aktivitet**

🕒 CARY

**Namn & Bild** | **Upprepning**

**Bild**



**Namn**

Gå ut med hunden

**Datum**

2023-02-09

**Beskrivning**

Glöm inte plastpåsar

**Starttid**

17:30

🎤 Spela in meddelande

**Extrainställningar**

☒ Visa i dagsplan ☒ Spela text vid larm

✕ Avbryt **Skapa**

Meddelande =  
Inspelat ljud eller uppläsning av text (Namn och Beskrivning)

🔍 Spela igen **✓ OK**

**Gå ut med hunden**

Glöm inte plastpåsar

**Namn**

**Beskrivning**

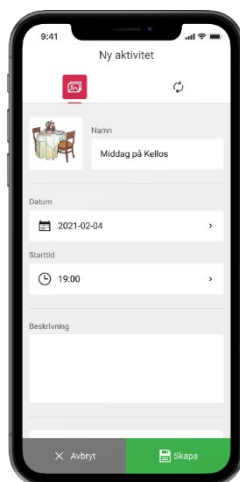


Bild =  
Bild från bildarkivet eller eget foto



# Så här fungerar det med myAbilia

Lägg till en aktivitet i CARY Base genom myAbilia



Aktiviteten visas i CARY Base



CARY Base uppdateras:

- Var femte minut
- När man trycker på Kalender