

Anpassa HandiKalender

En guide till de viktigaste anpassningarna och inställningarna i HandiKalender för iOS.




HandiKalender




Inställning notiser

Hur ska larmnotiser från HandiKalender visas?

Banderoll
Notis

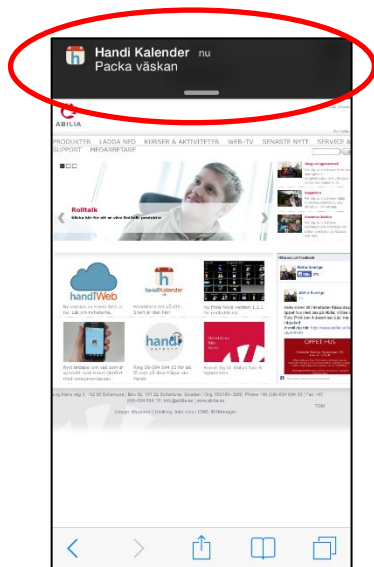

"Banderoll"
(Förinställt)

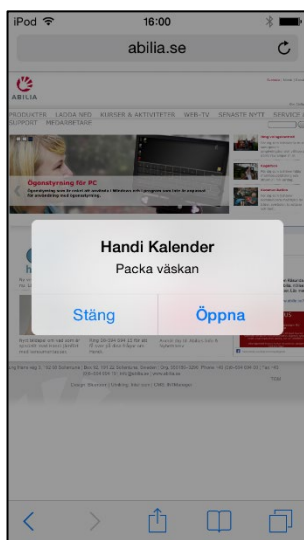

"Notis"
(Rekommenderas)



*HandiKalenders
Larmvy*

(Om skärmen
är tänd och
HandiKalender
är igång visas
larmvyn direkt)



Bildstöd – myAbilia




Behöver användaren bildstöd?

Ja ☐
Nej ☐

Om ja, vilka bildbaser?

Badrum	<input type="checkbox"/>
Basbilder	<input type="checkbox"/>
Handi	<input type="checkbox"/>
Handla	<input type="checkbox"/>
Kläder	<input type="checkbox"/>
Rolltalk	<input type="checkbox"/>
Skolan	<input type="checkbox"/>
Smileys	<input type="checkbox"/>
Annat	<input type="checkbox"/>

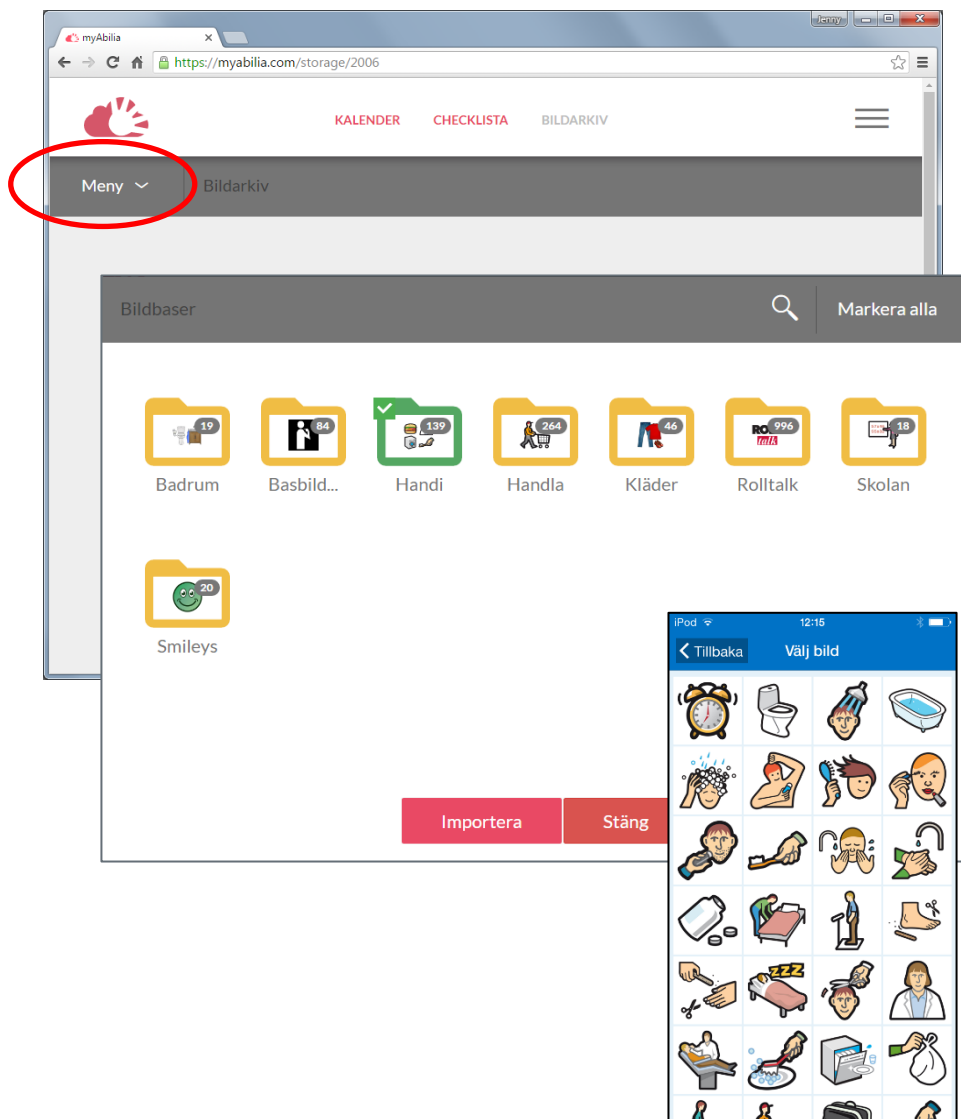

Använd myAbilia för att anpassa bildarkivet i Handi.

Talstöd

Ska talstöd (talsyntes) användas?

Ja ☐
Nej ☐


1. Tryck på *Talstöd*-knappen så att den blir markerad.
2. Tryck på det som ska läsas upp.




Kalendervyn - visning

Hur ska aktiviteterna visas när appen startar?


I en lista
Vid en tidpelare
I veckovy
I månadsvy

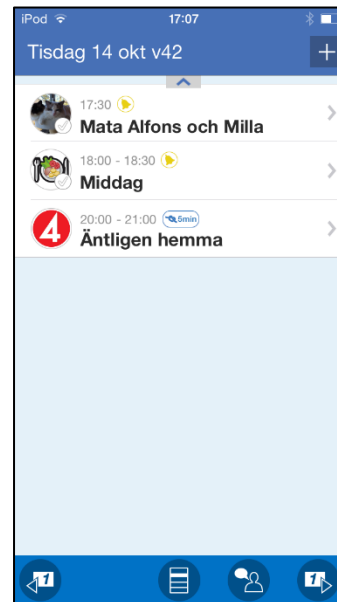

Lista

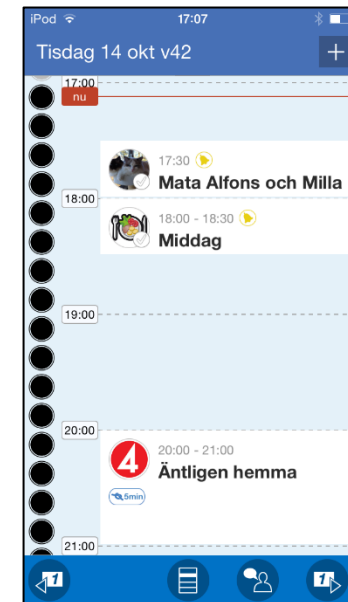

Tidpelare

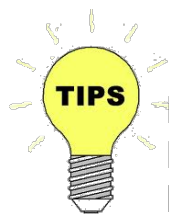

På iPad kan man växla mellan visningsvyerna längst upp på sidan.
På iPhone får man gå till Kalendermenyn och välja Veckovy eller Månadsvy.

Kalendervyn – bläddra

Ska man kunna bläddra bakåt till aktiviteter som har varit samma dag?


Ja ☐
Nej ☐

Ska man kunna bläddra i dagar framåt?

Nej ☐
Ja, max 6 dagar ☐
Ja, obegränsat ☐

Ska man kunna bläddra i dagar bakåt?

Ja ☐
Nej ☐

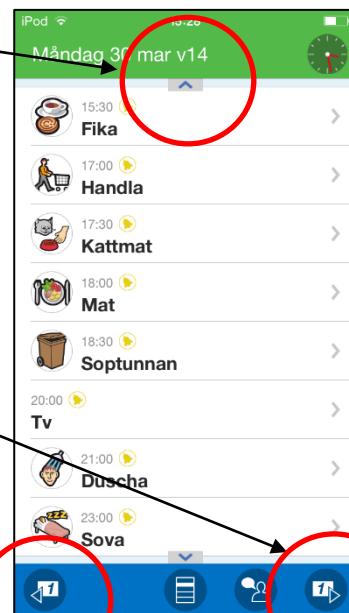

Kalendervyn – aktiviteter


Ska den digitala tiden för aktiviteten visas?

Ja
Nej

☐
☐

Ska texten för aktiviteten visas?

Ja
Nej

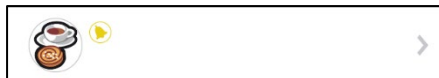☐
☐


Aktivitetsvyn

Ska användaren kunna ta bort en aktivitet?

Ja ☐
Nej ☐

Ska användaren kunna ändra en aktivitet?

Ja ☐
Nej ☐

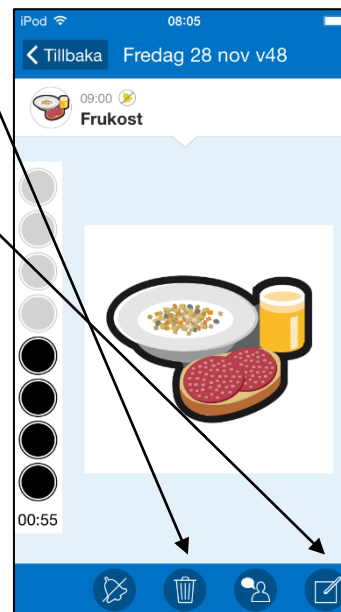

← Visa sista kvarten som 5 punkter

← Visa digital nedräkning nedanför kvarturet



☐
☐

Lägga in aktivitet – förvalt larm

Vilken typ av larm ska vara förinställt?

Larm (ljudsignal) ☐
Tyst larm (ljudlöst) ☐
Inget larm (ingen notis alls) ☐

Larmtypen kan sedan ställas in per aktivitet.

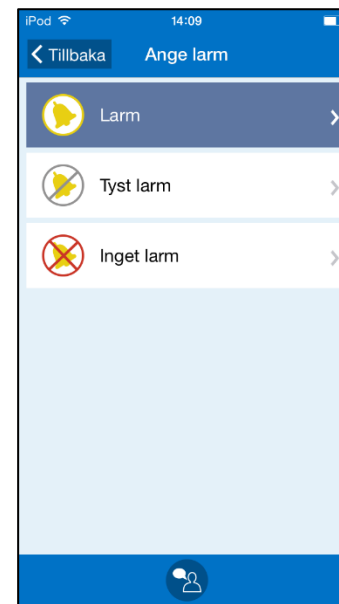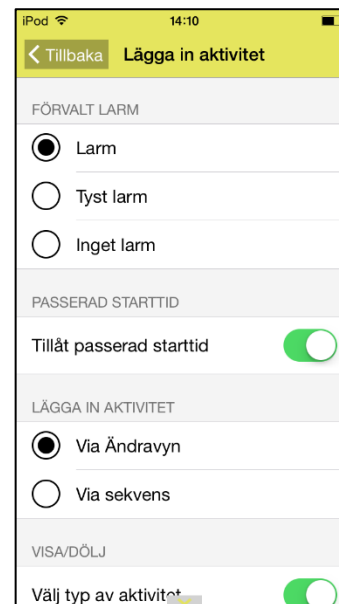

Lägga in aktivitet


Ska man kunna lägga in aktiviteter på starttid som passerat?

Ja ☐
Nej ☐

Ska man lägga in aktiviteter via Ändravyn eller i sekvens?

Ändravyn ☐
Sekvens ☐

Ändravyn

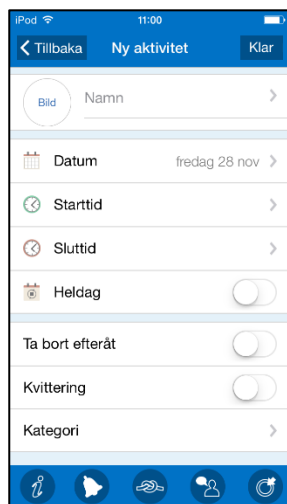

Sekvens




Lägga in aktivitet via Ändravyn

Om Ändravyn är valt, vilka vyer ska visas?


Ska man kunna välja typ av aktivitet?

Ja ☐
Nej ☐

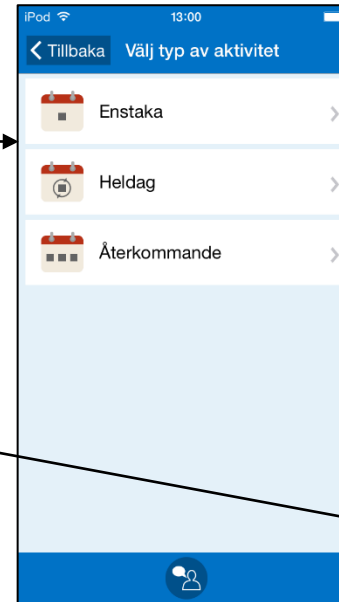

Ska man kunna välja basaktivitet?













Ja ☐
Nej ☐

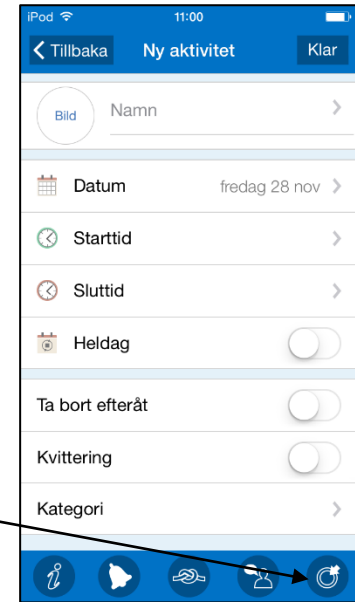

Lägga in aktivitet via sekvens

Om sekvens är valt, vilka vyer ska visas?

Välj datum
Välj typ av aktivitet
Välj basaktivitet
Välj bild
Namnge aktiviteten
Info-meny
Ta bort efteråt och kvittering
Ange larm
Ange påminnelse
Välj kategori
Tillgänglig för
Ange starttid
Ange sluttid

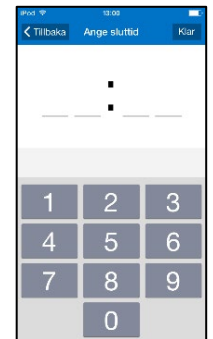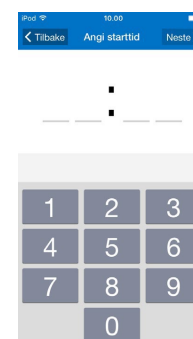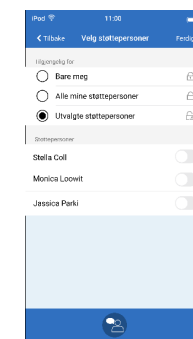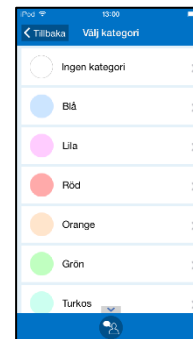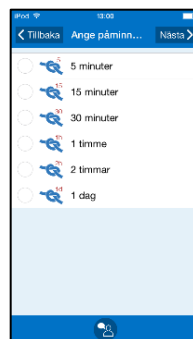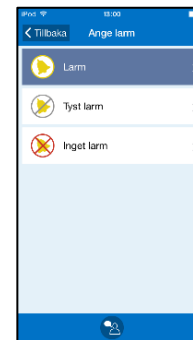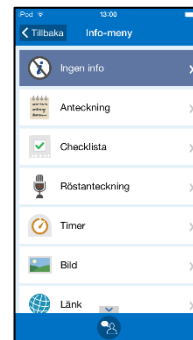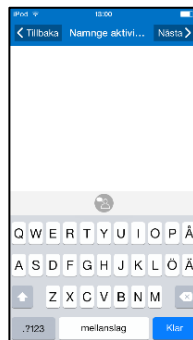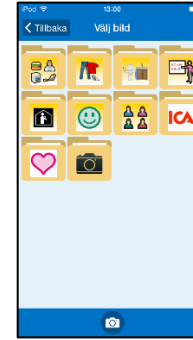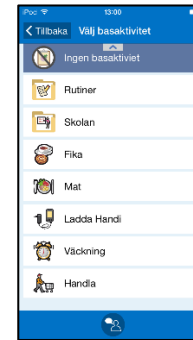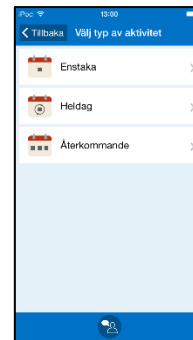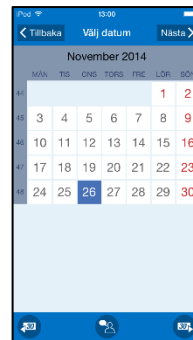


Välj i Inställningar|Lägga in aktivitet.

Ändravyn

Vilka funktioner ska visas i Ändravyn?

Datum	<input type="checkbox"/>
Sluttid	<input type="checkbox"/>
Heldag	<input type="checkbox"/>
Kvittering	<input type="checkbox"/>
Ta bort efteråt	<input type="checkbox"/>
Kategori	<input type="checkbox"/>
Tillgänglig för	<input type="checkbox"/>
Info-menyn	<input type="checkbox"/>
Larmtyp	<input type="checkbox"/>
Påminnelse	<input type="checkbox"/>


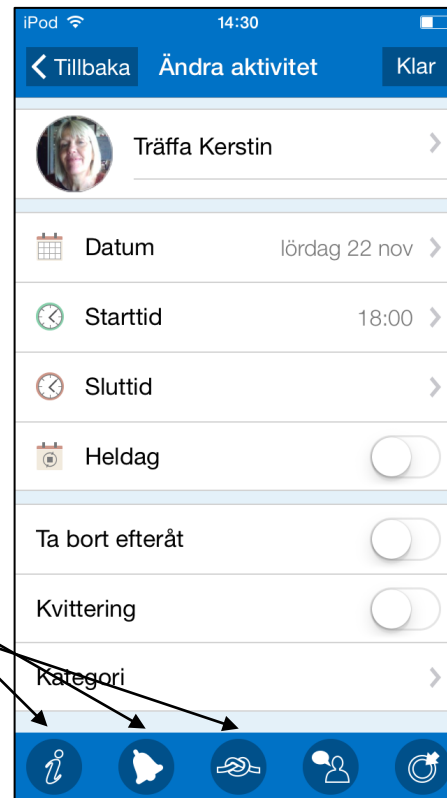


Koppla funktion till aktiviteten

- Få information när man behöver den
- Man behöver inte leta

Vilka funktioner ska visas i Info-menyn och därmed kunna kopplas till en aktivitet?

Anteckning	<input type="checkbox"/>
Checklista	<input type="checkbox"/>
Röstanteckning	<input type="checkbox"/>
Timer	<input type="checkbox"/>
Bild	<input type="checkbox"/>
Länk	<input type="checkbox"/>
Adress	<input type="checkbox"/>
Kontakt	<input type="checkbox"/>
Telefon	<input type="checkbox"/>
SMS	<input type="checkbox"/>

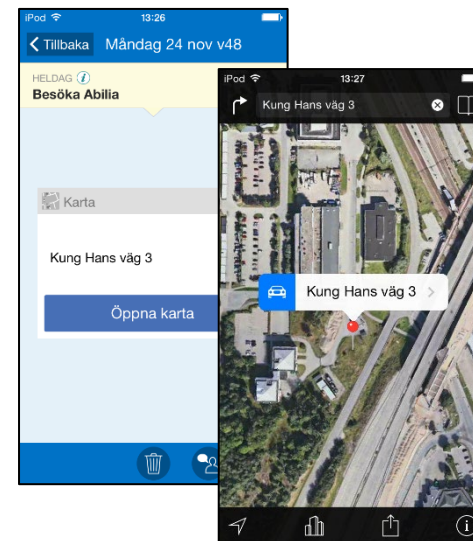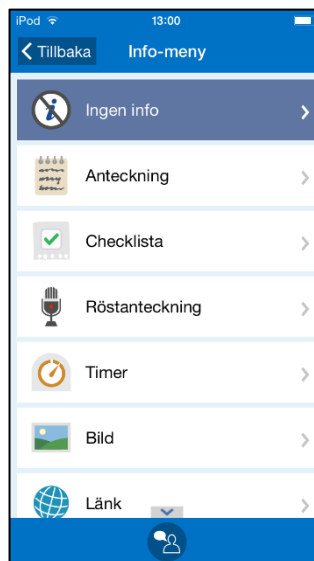

Exempel på kopplad adress

Funktioner i Kalendermenyn

Ska användaren lägga in nya aktiviteter själv?

Ja ☐
Nej ☐

Ska användaren kunna gå till andra dagar i kalendern?

Ja, månadsvy ☐
Ja, veckovy ☐
Nej ☐

Ska användaren kunna använda timer?


Ja ☐
Nej ☐

Ska användaren kunna söka aktiviteter?

Ja ☐
Nej ☐

Ska användaren kunna hantera basaktiviteter och
bastimers?

Ja ☐
Nej ☐

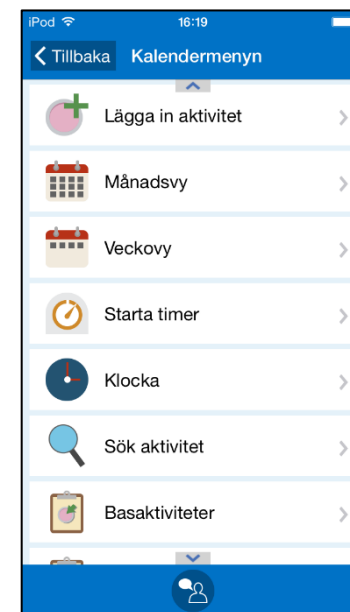

Kalendervyn - tid

Ska det vara analog klocka eller Ny aktivitet-knapp i datumfältet?

Analog klocka ☐
Ny aktivitet-knapp ☐



Ska månad markeras med symbol eller med veckonummer?

Handi-symbol ☐
Pictogram ☐
Veckonummer ☐
Inget ☐



Ska dagarna ha veckodagsfärger eller inte?

Veckodagsfärger ☐
Inte veckodagsfärger ☐



Grön måndag
Blå tisdag
Vit onsdag
Brun torsdag
Gul fredag
Rosa lördag
Röd söndag






ABILIA

Klockvyn

Ska det vara analog eller digital klocka i visningen?

Analog	<input type="checkbox"/>
Digital	<input type="checkbox"/>
Analog och digital	<input type="checkbox"/>

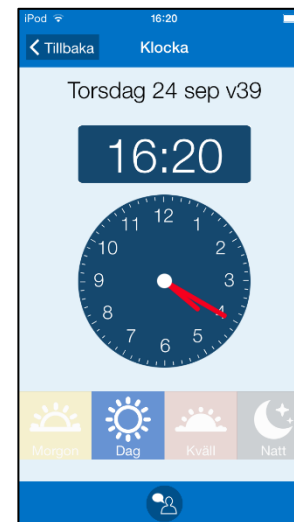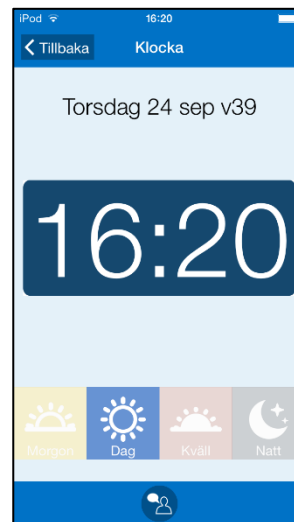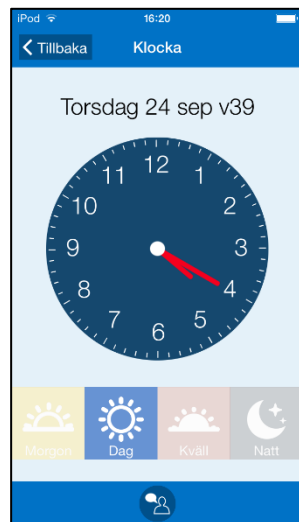

Veckovyn



Ska återkommande aktiviteter visas?


Ja ☐
Nej ☐

Hur många dagar ska visas i veckovyn?

5 ☐
7 ☐

Hur ska aktiviteter visas?

Med tid ☐
Med bild ☐

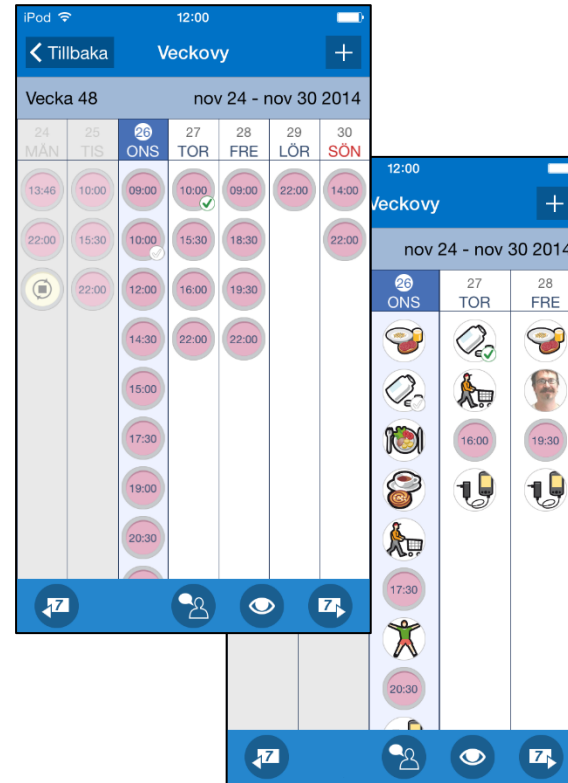

Starta timer

Ska användaren kunna
välja Bastimers?


Ja ☐
Nej ☐

Ska man kunna välja
en bild till en ny timer?

Ja ☐
Nej ☐

Ska man kunna lägga
in text till en ny timer?

Ja ☐
Nej ☐

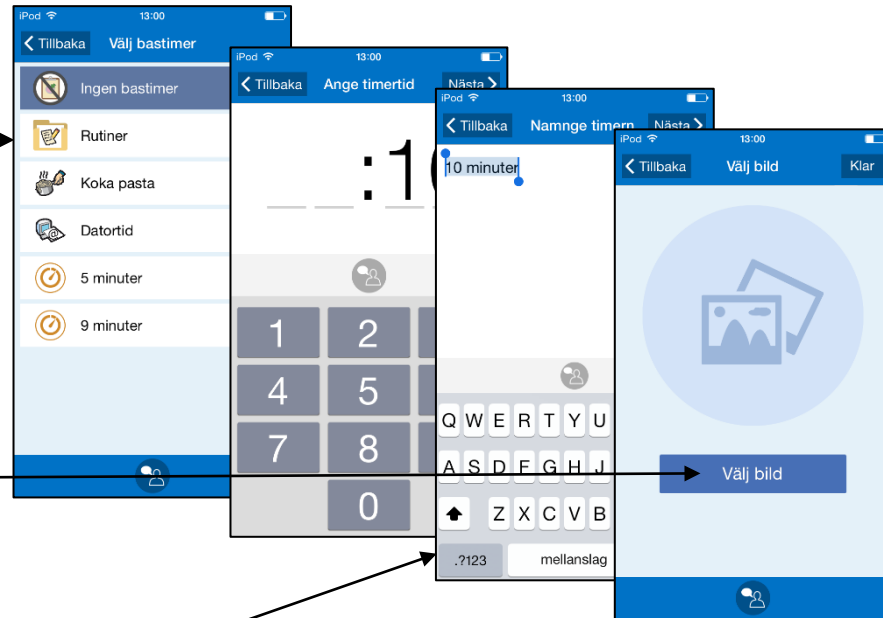

ABILIA

Kvittering av aktiviteter

För att bekräfta för sig själv eller andra (via myAbilia) att aktiviteten är utförd



Inte utförd




Utförd

Behöver användaren kvittering
på aktiviteterna?

Ja ☐

Nej ☐

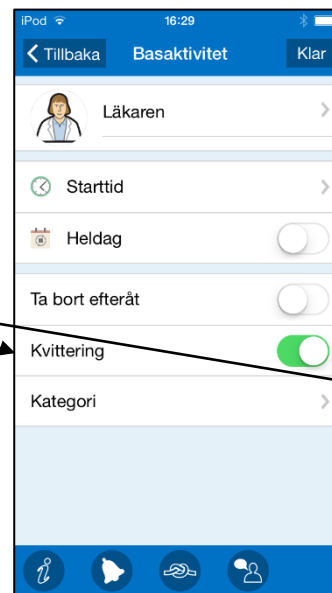

*Lägg in direkt i
basaktiviteten!*



*Kom ihåg att välja
vid inläggning*



ABILIA

Ange i **Inställningar|Basaktiviteter** eller vid inläggning av aktiviteten.


Använda basaktiviteter

- Förprogrammerade aktiviteter som gör inläggningen enklare
- Ger förslag på aktiviteter och kan därför vara aktiverande och motiverande

Vilka **basaktiviteter** behöver användaren?




Det går att koppla funktioner även till basaktiviteterna, se [Koppla funktion till aktiviteten](#).

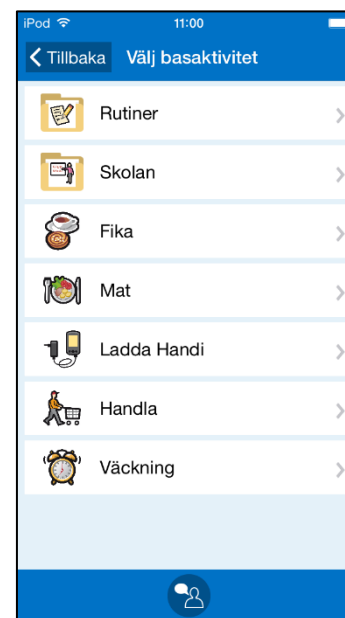

Använd bastimers

- Förprogrammerade timers som gör inläggningen enklare
- Möjligt att ha flera timers igång samtidigt och skilja dem åt med namn och bild

Vilka **bastimers** behöver användaren?

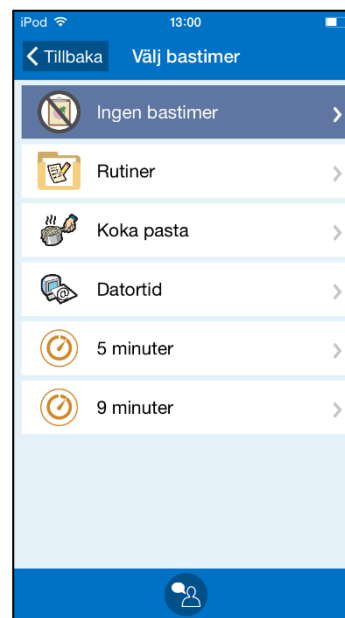


Larm – Ljudsignal

Hur länge ska larmen ljuda (som längst)?

10 sekunder	<input type="checkbox"/>
20 sekunder	<input type="checkbox"/>
30 sekunder	<input type="checkbox"/>

I larmljudets namn står hur långt det är.
Välj mellan tre larmljud per tidslängd.

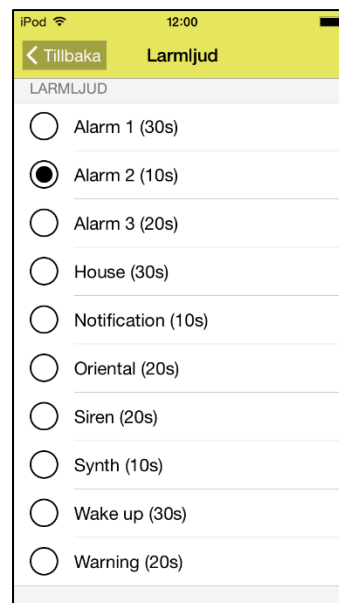


Kodskyddad inställningsmeny

- Förhindrar oavsiktlig ändring av inställningar, basaktiviteter och bastimers

Behöver inställningsmenyn i
HandiKalender kodskyddas?

Ja ☐
Nej ☐

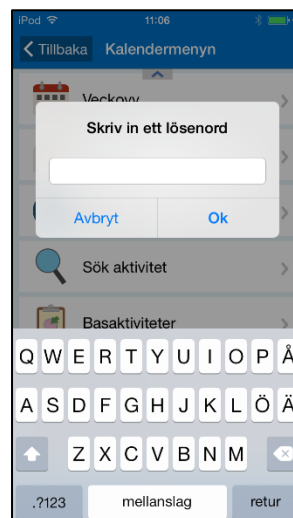

handi

Ett hjälpmedel för
trygghet och självständighet

Läs mer på www.abilia.se