


CuroCell® A4 CX20

Ett automatiskt och flexibelt växeltryckssystem
med god komfort och funktionalitet

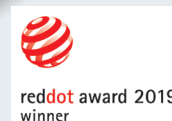

CuroCell® A4 CX20 med Toppdel Stone/U-del CC

FAKTA	TILLVAL
<ul style="list-style-type: none">• Typ: Växeltrycksmadrass• Höjd: 20 cm• Rekommenderad brukarvikt: Upp till 250 kg• Strömförsörjning: 100-240 V / 50-60 Hz• Ljudnivå kontrollenhet, max: 17 dBA⁽²⁾, 35 dBA⁽⁶⁾• Garanti: 2 år• PVC-fri• Maskintvätt i max 95 °C, torktumling• Rengöring av överdrag: Torka av med rengöringsmedel och/eller desinfektionsmedel• Klortåligt (1%) multistretchöverdrag (överdrag Stone med svetsade sömmar, 10%)	<ul style="list-style-type: none">• Slitstark väska• Lakanshållare
	STORLEKAR
	80/85/90/100/105/120x200/210 x 20 cm

CuroCell® A4 CX20

CuroCell® A4 CX20 erbjuder enkelhet i kombination med komfort samtidigt som systemet på ett effektivt sätt bidrar till att förebygga och behandla trycksår till och med kategori 4, samt oklassificerade trycksår⁽¹⁾. Systemet är utvecklat för att minska påverkan av skjuvkrafter och ge ett förbättrat mikroklimat.

CuroCell® A4 CX20 har en automatisk kontrollenhet med ett användarvänligt gränssnitt. Madrasssystemet reglerar självständigt och utan manuell justering madrassens inre tryck till olika värden baserat på vårdtagarens vikt och lägesändring. Ingen manuell åtgärd behöver göras för att påverka madrassens inre tryck.

Kontrollenheten är utrustad med det pulserande läget. I det pulserande läget kombineras fördelarna med Konstant lågt tryck (minskat maximalt tryck) med det pulserande lägets tryckavlastande effekt. Pulserande läge innebär att trycket alternerar och celler töms, men inte helt. Detta ger lägre maximalt tryck mot huden och en mindre rörelse i madrassen, vilket bidrar till ökad komfort och stabilitet. Det pulserande lägets kliniska effekt har undersökts i vetenskapliga studier där både vävnadsgenomblodning, samt förebyggande och behandlande effekt mätts⁽⁷⁾⁽⁸⁾.

Samtliga madrasser levereras med hygienöverdrag som är elastiskt i alla riktningar och uppfyller vårdens krav på hygien⁽³⁾, kvalitet och säkerhet⁽⁴⁾. Alla överdrag är ångpermeabla⁽⁵⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. De är tillverkade av moderna och återvinningsbara material.

REFERENSER

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

(2): "EN ISO 11201 Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels", SP 2018.

(3) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, "performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents".

(4) Sveriges Regioner och Kommuner. 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).


(5) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(6) ISO 3746:2010 "Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane"

(7) Zwaenepoel, E., et al., Int Wound J, 2020 17(1).

(8) Worsley P, Dr Bostan L., Bader D. Investigation of the biomechanical and physiological responses to prolonged lying postures during three mattress modes. Report from University of Southampton, 2018.



KONTROLLENHETENS FUNKTIONER	MADRASSENS FUNKTIONER
<ul style="list-style-type: none">• Automatisk kontrollenhet som anpassas individuellt till vårdtagaren• Användarvänligt gränssnitt• Ljud- och ljusnotifikationer• Tre programlägen: pulserande, alternerande och konstant lågt tryck• Med automatisk återgång• Pack & Go® - funktion för automatisk tömning av luft• Tyst drift och vibrationsfri• Låg spänning (12V strömförsörjning)• Mjuka friktionshängare med extra mjuk spets• Air Flow Control™; Konstant temperatur, god användarkomfort, låg energiförbrukning	<ul style="list-style-type: none">• Utbytbara celler med säkerhetsmadrass i luft• Hälfunktion• Multifunktionellt inneröverdrag• CPR-funktion med transportfunktion• Smart kabelhantering• Design för enkel hantering och användning• Dragkedja med droppskydd• Statiska huvudceller <p> Läs alltid bruksanvisningen innan produkten används.</p> <p>Care of Sweden och CuroCell är varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Med ensamrätt. Senaste uppdatering: 2021-04-13.</p>